

Kunde:	
Exklusivität:	
Konditionen:	
Lieferung:	
Bearbeiter:	
Datum:	

Ausgabe:	FB 1114-046
Datum:	15.06.23

Artikel: Pegasus Med 14 305

7-Zonen LLQ® Kaltschaummatratze

Kernhöhe: 14 cm Härtegrad: H2 = weich, H3 = mittelfest

Besonders offenzelliger Spezialkaltschaum in LLQ® LongLifeQuality mit hohem Raumgewicht von RG 50 kg/m³ gewährleistet eine sehr gute Punktelastizität und besonders gute Druckverteilung.

LLQ Kaltschaum ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, besitzt einen sehr hohen Komfortfaktor hinsichtlich Druckentlastung und Körperunterstützung und ist besonders alterungsbeständig.

Spezialkonturenschnitt: symmetrisch gestaltete Würfeloberfläche, die entsprechend den Körperzonen untergliedert ist und druckentlastend strukturiert ist

Medizinischer PU-Nässeschutzbezug, glatt verarbeitet, Flüssigkeitsdicht, Viren- und Bakteriendicht, desinfizierbar zur Verhinderung von Infektionen

Trikotunterbezug um den Matratzenkern zur Vermeidung von Hafteffekten und Scherkräften durch den Oberbezug mittels 2-seitigem Reißverschluss bequem abnehmbar


Randzonenverstärkung für eine festere Sitzkante sowie zur Sicherheit Passt sich ohne Einschnitte optimal an die Verstellung des Lattenrahmens an
Schaumstoff CO² neutral geschäumt, Schadstoffgeprüfte Materialien

Für verstellbare Lattenroste geeignet

Bezug abnehmbar und waschbar bis 95° C


Hergestellt in Deutschland

Medizinprodukt gemäß Anhang IV Verordnung (EU) 2017/745
(nur Ausführung mit PU Bezug)

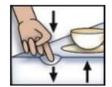

Reduzierung des mittleren Auflagedruck mmHg in %, Matratze in Härtegrad 2
Proband klein/leicht 58kg - 27% Proband mittel/mittel 78kg- 22%

Proband groß/ schwer 107kg - 17%

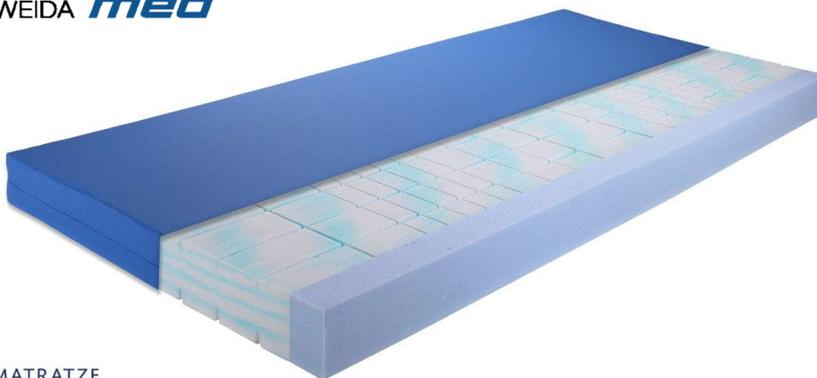

305 - 100% Polyester mit PU Beschichtung

Größe	Höhe 14cm			
		PU Bezug 190 g/m², bi-elastic		
90x200				
100x200	- €			
90x220	- €			

Bestimmung der Druckverteilung nach Bedienungsanleitung "SENSOR PRESSURE MAPPING SYSTEM", Version 4.3
Standarderweiterte Matratze
Pegasus Med 305 100A
Prüfaufbau: Standarderweiterte Matratze oder Probe
Standarderweiterte Matratze
Sensormatte SENSOR X2 (1Paar)
B (mittiggroß/mittelschwer)
Probant: 1 Frame pro Sekunde
Auswertung: Querschnitt aus 100 Frames
Die Druckverteilungsmessung wird als Vergleichsmessung, d. h. Bezugswert ohne Probe und mit Probe durchgeführt.

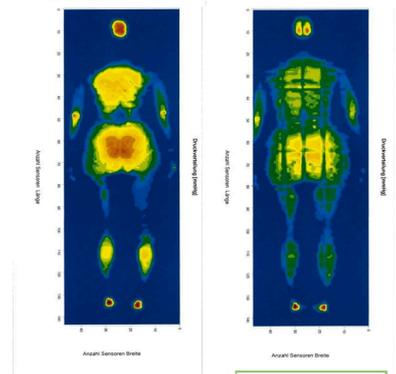


Abb.unverbindlich

Abmaßregel:
nur Prozente

PU Bi-elastic
304 mint
305 dunkelblau
310 weiß



Irrtümer und technischen Änderungen behalten wir uns vor